

電動ストレッチャー【Eストコン】

品番：AD-010015E

取扱説明書



＜もくじ＞

- P 1 ご使用前に
- P 2 点検・お手入れ・保管
- P 3 各部の名称と材質・仕様
- P 4 組み立て方① バッテリーの接続
- P 5 組み立て方② タワー・点滴棒・ボンベ架台
- P 6 使用時の扱い方 背上げ・リモコン
- P 7 開き方・折り畳み方
- P 8 担架の取り外し方
- P 9 手動の使い方（電動が使えない場合）

マルトミケアハート

＜株式会社マルトミレンタ福祉介護事業部＞

■ ご使用前に

この度は、電動ストコン「AD-010115E」（以下：Eストコン）をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
安全にご使用いただく為に、この説明書をよくお読み頂き、正しくご使用ください。
また必要な時にすぐお読みいただける様に、大切に保管してください。

本文中の図記号表示の意味、内容は以下の通りです。	
	警告・・・人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	注意・・・人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容
図記号の意味	
	「警告」や「注意」を要す事項を表します。
	「禁止」を表します。
	「必ず守ってほしい行為」を表します。

【警告】

- 移動時には必ず安全ベルト（２ヶ所）をして下さい。
- 耐荷重は120kgです。
- フレーム等に巻き込まれない服装でご利用ください。
- 使用している間、介護者は利用者から目を離さないでください。
- 人を乗せて手押し移動のストレッチャー以外には使用しないでください。
- 本機を組み立ての際、必ず金具が固定されていることを確認し、ご使用して下さい。
- 壊れた状態、不具合を感じた時は、速やかに使用をおやめいただき、すぐに販売店にご連絡を下さ
- 改造はしないでください。
- 本機へ利用者を乗せ降ろしする場合は必ずキャスターをロックし、固定して下さい。
- ストレッチャーに人を乗せる場合は、マットレス前後中央から等分に体重が分散するように乗せて下さい。
片側に体重がかかるような乗せ方で移動するとバランスを崩し転倒・転落の原因となります。

【注意】

- 階段・段差・溝・長い昇り降り坂での使用は危険です。
- シャワーストレッチャーではありません。湯水などを掛けしないでください。
- エレベーターを使用する際、ドアの隙間に車輪が落としこまないか確認をして下さい。

-  ベッドなどから移乗またはベッドへの移乗は、必ず2名以上で行って下さい。
-  アクチュエーターの電池残量は使用前に必ず確認して下さい。
-  手動で高さ調整ピンを使用した場合、必ずピンを抜いてください。（故障の原因になります）
-  降ろすときは人の手や物が挟まっていないか確認の上必ず降ろして下さい。

■ 点検・お手入れ・保管



＜使用前の点検＞

- 1 : 担架固定用ピンに異常はないか確認
- 2 : キャスターに異常がないか確認
- 3 : キャスターのロックがスムーズに行えるか確認



異常が見られた場合は、使用を中止し、すぐに販売店までご連絡をお願い致します。

＜お手入れ＞

マットレス・枕は水またはお湯で、汚れがひどい場合は中性洗剤をご使用ください。

洗浄後は十分に乾燥させてからご使用下さい。

※ 注意：シンナー・ベンジン・アルコール類は使用しないでください。



点検・整備・清掃をして下さい。

ボルト・ナットの緩み・フレームのゆがみ・ガタつきなどの点検を緩みがあれば締めて下さい。
泥やほこりなどは、ぬれた布でふき取ったあと乾いた布でふき、可動部分に潤滑油さしていた
できれば長くご使用いただけます。潤滑油（KURE 5-56等）を赤丸印にさしてください。



＜保管＞

保管場所は室内で高温多湿でない直射日光が当たらない場所で保管をお願い致します。


折り畳んで立てて保管する場合は、倒れないように保管して下さい。

※倒れてケガ、損傷する場合があります。


- 保証書・・・・・・保証期間は1年間です。大切に保管をお願い致します。（別紙）
- アフターサービス・・・・・・万が一故障・不具合などがございましたら、販売店までご連絡ください。
- アクチュエーターの取扱説明書は別紙参照

■ 各部の名称と材質・仕様

<担架の各部の名称>

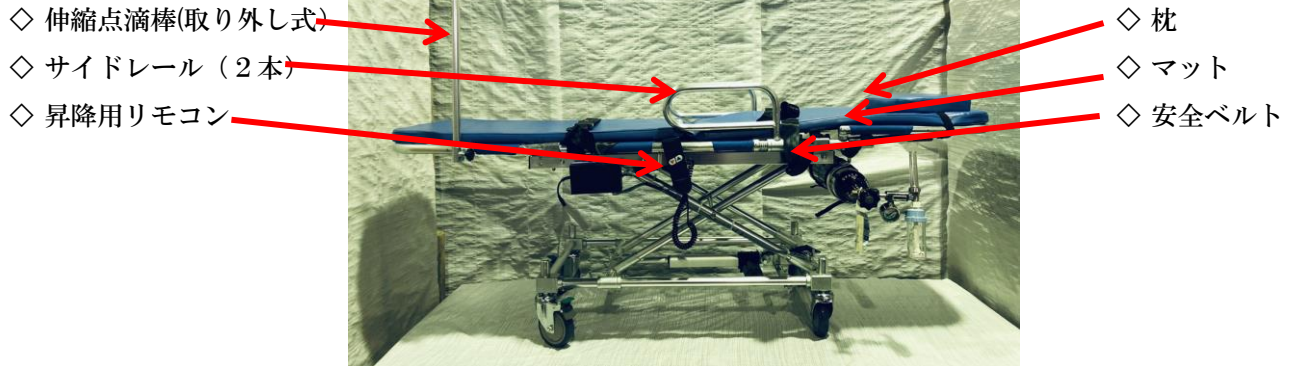

<トランスポーターの各部の名称>

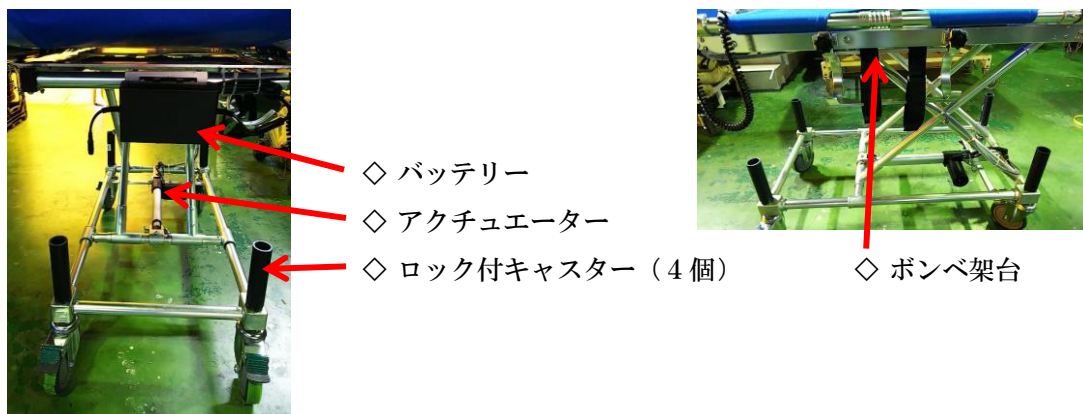

【足側】

<各部の材質・仕様>

品番	AD-010115E
材質	フレーム部／アルミニウム合金
	マット・枕／ポリエステル
	クッション／ウレタン
	安全ベルト／PP・ポリエステル
	キャスター／PP・PU系樹脂 (125mmφ)
重量	約30kg
サイズ	最大：1820mmX550mmX750mm
	最少：1820mmX550mmX330mm
	折り畳時:1020mmX550mmX370mm
耐荷重	約120kg

■ 組み立て方 ① バッテリーの接続



※ Eストコンは自動で上下するのにバッテリーをつけないと動作しません。

《下記の順序に従って装着してください》

① バッテリーを装着

ストレッチャーの足側にバッテリーを装着する爪があります、下からバッテリーに通して下部をハメこんでください。




② 配線を接続

配線の穴に入るように接続してください。



※ 充電の仕方

充電の方法は充電器の配線と接続。コンセントで充電します。

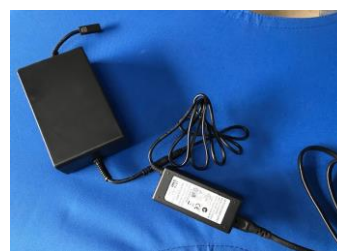


充電がなくなりましたら警告音になります。

■ 組み立て方 ② タワー・点滴棒・ボンベ架台


〈タワー取り付け方〉 ※必要に応じて取り付けてください。

酸素ボンベ架台を取り付けた場合、担架を下げるとボンベ架台と接触する恐れがあるためタワーを取り付けます。
また揺れ防止にもなりますので揺れを防ぐのにもご利用ください。

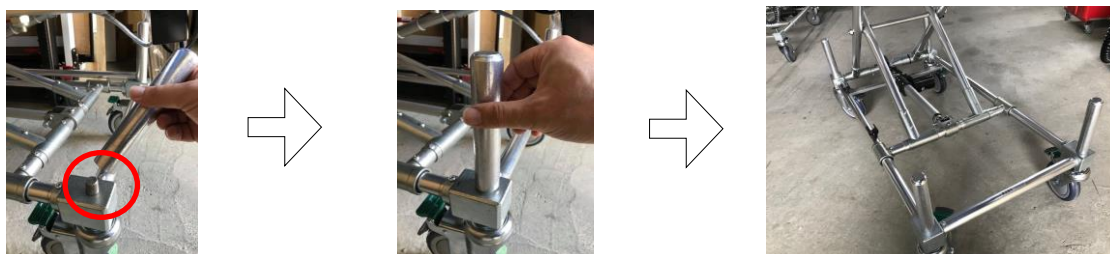

〈点滴棒架台取り付け方〉 ※必要に応じて取り付けてください。

点滴棒の位置を変更できるよう取り外せる形になっています。
六角レンチ(同封)を使用し下記のように取り付けてください。

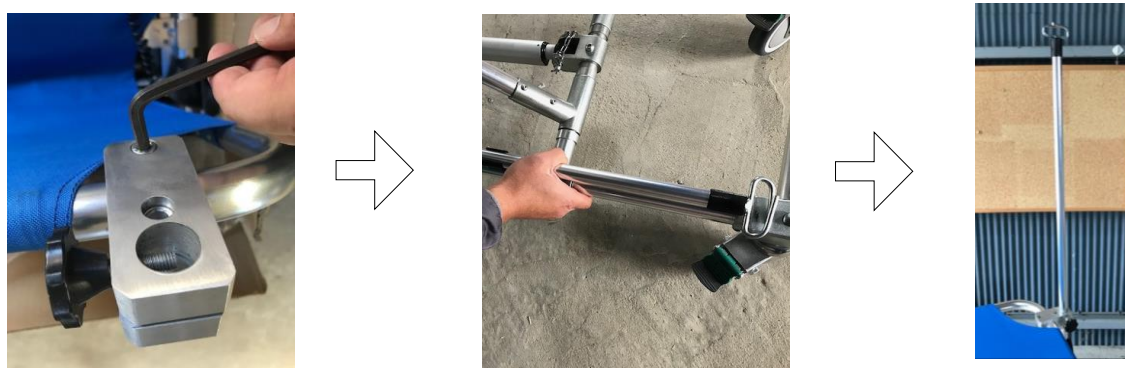

〈酸素ボンベ架台取り付け方〉 ※必要に応じて取り付けてください。


酸素ボンベを使用する際に取り付けてください。(使用中はタワーを併用してください)
ストレッチャーのサイドに取り付け穴がありますのでそこにネジで取り付けれるようになっています。
下記の方法で取り付けてください。



■ 使用時の扱い方 背上げ・リモコン

〈背上げ〉

背上げは頭側のレバーを握り、4段階で調整します。

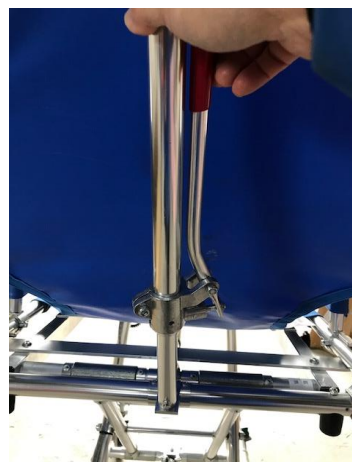

〈リモコン〉

担架の上げ下げはリモコンで行ってください。（上段750mm、下段330mmまで上下できます）



【あがる】



【さがる】

※ 揺れ防止パイプ(タワー)に当たったら必ず止めてください。故障の原因になります。

〈ストッパー〉

キャスター、4箇所ToStrッパーがついています。



【ストッパーかける】



【ストッパー解除】

■ 開き方・折り畳み方

〈マットと枕の設置〉



担架にマットを乗せます。



紐でくくります。



枕を設置してください。

〈サイドレールの組み立て〉




広げる場合は矢印の方向に広げます。



畳む場合は手前に引っ張る形で折り畳みます。

〈足側金具をスライドさせる〉

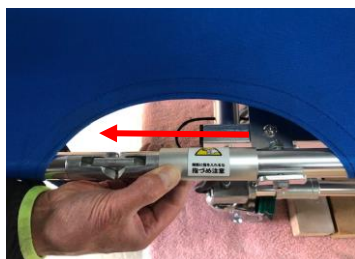

広げるときは金具を矢印の方向に。



折り畳みのときは矢印の方向に。

〈担架を折りたたむ〉



広げるときは金具を矢印の方向に。



折り畳みのときは矢印の方向に。

■ 担架の取り外し方

〈ネジ(ピン)を外します〉



少し持ち上げた状態でしたら取れやすくなります。



ネジ(ピン)を外します。

〈担架を外す〉



トランスポーターから上部の担架を取り外します。



担架としてもご利用いただきます。

■ 手動の使い方（電動が使えない時）

※ アクチュエーターが使用できなくなった場合、基本的にはメーカーにご連絡ください。

※ どうしても手動で使えない場合は本体を横にしてアクチュエーターを取り外してください。

〈アクチュエーターの取り外し方〉（組み立て方は逆の順番）

① バッテリー接続の線を2ヶ所はずします。




結束ベルトを切る。




2か所切ってください。

② ピンをはずしてロックピンを左右共ぬきます。

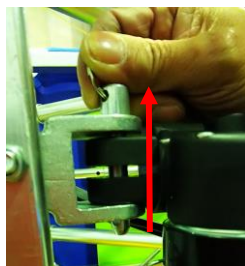

左右のピンを抜く。

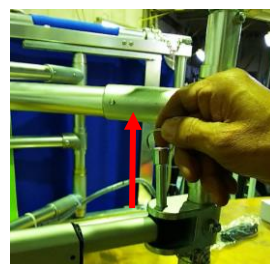

左右はずすとアクチュエーターが取れます。


〈手動で担架を調整する〉 ※ 高さは一番上の位置（低い位置では留められません）



手動用ロックピン



手動用ピンをはずします。

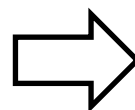

上段の丸穴にピンを刺します。
(3段階で調整できます)

※ ピンを刺したままアクチュエーターを作動させると故障の原因となります。

〒640-0352 和歌山県和歌山市井戸189番地の1
マルトミケアハート 株式会社マルトミレンタ福祉介護事業部
TEL:073-479-1321 FAX:073-479-3089